

# INSTRUCCION



**199710928**



**199720928**



**199730928**



# ¡ INFORMACIÓN IMPORTANTE! ¡ GUARDAR PARA USO FUTURO!



No perfore la almohadilla térmica.



No use el cojín térmico cuando  
esté doblado.



No debe ser utilizado por niños  
muy pequeños (de 0 a 3 años).




Lavar a máquina la almohadilla sin  
centrifugado a 30° C.



No usar lejía.



No secar el cojín térmico en una  
secadora.

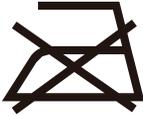

**No planchar el cojín térmico.**



**No limpiar en seco.**

### **La información de seguridad:**

- Examine el aparato en busca de señales de desgaste o daño. Si hay tales señales, el aparato ha sido mal utilizado o no funciona, no intentar volver a encenderlo.
- Antes de conectar el dispositivo a su suministro de energía, asegúrese de que la tensión de suministro indicada en la placa de calificación sea compatible con su suministro eléctrico.
- No doble ni pliegue la almohadilla térmica durante su uso.
- No perfore la almohadilla ni coloque alfileres de seguridad ni otros objetos puntiagudos o afilados en ella.
- No use el dispositivo en niños o personas que estén discapacitadas, dormidas o insensibles al calor (personas que no puedan reaccionar ante el sobrecalentamiento).
- Los niños menores de 3 años no pueden usar este dispositivo, porque no pueden reaccionar al sobrecalentamiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento de la almohadilla no deben ser realizados por niños.

- Nunca use la almohadilla sin supervisión.
- El cable y la unidad de control del aparato pueden presentar riesgos de enredos, estrangulamiento, tropiezos o pisoteo si no se colocan correctamente. El usuario debe asegurarse de que la unidad de control y los cables eléctricos se coloquen de manera segura.
- El dispositivo es solo para uso privado y no debe ser utilizado en hospitales.
- No se duerma mientras la almohadilla térmica esté encendida.
- El uso prolongado de la almohadilla térmica en un ajuste alto podría causar quemaduras en la piel.
- No cubra la almohadilla con otras almohadas. El interruptor de control no debe estar cubierto ni colocado encima o debajo de la almohadilla mientras la unidad esté en funcionamiento.
- No se sienta sobre la almohadilla térmica. En su lugar, coloque la almohadilla sobre la parte del cuerpo a tratar. El uso previsto es solo para la espalda y el cuello.
- Nunca toque una almohadilla térmica que haya caído al agua. Desenchufe la unidad de la toma de corriente de inmediato.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Nunca arrastre y tire de la almohadilla térmica por el cable de alimentación y no deje que el cable se enrede.
- No use la almohadilla térmica cuando esté mojada y úsela solo en un ambiente seco (no en el baño ni en entornos húmedos).

## Funcionamiento:



Conecte la almohadilla a la toma de corriente, presione el botón de encendido y luego presione el botón de ajuste de temperatura, la almohadilla comenzará a funcionar y el indicador se encenderá.

Sentirá la almohadilla calentándose gradualmente.

Si desea una temperatura más alta, configure el ajuste de temperatura en 2<9. Si la almohadilla se calienta demasiado, baje

de posición. La almohadilla se apaga automáticamente a los 90 minutos. Para apagar la almohadilla térmica, presione el botón de encendido/apagado. El indicador de energía se apagará, lo que indica que la unidad está apagada. Ahora desenchufela almohadilla de la toma de corriente.

#### Limpeza y mantenimiento Almohadilla térmica:

- Antes de limpiar la almohadilla, desconéctela de la toma de corriente y deje que se enfríe durante al menos diez minutos.
- La almohadilla térmica está equipada con un cable desmontable. Desconecte el enchufe y retire el cable de la almohadilla térmica.
- La almohadilla térmica se puede lavar en lavadora a 30° en un programa delicado.
- Aclarar la almohadilla térmica varias veces para eliminar todo el detergente.
- Guarde la unidad en un lugar limpio y seco, colocada plana sin nada que la cubra o apoye encima.
- Solo use el dispositivo una vez que esté completamente seco.

#### Cubierta de la almohadilla térmica:

- Quite la almohadilla térmica de su cubierta.
- Lave en seco la cubierta extraíble o según las instrucciones detalladas en la etiqueta.

### Eliminación:



No deseche este producto como residuos no clasificados. Es necesario recoger estos residuos por separado para su tratamiento especial. Para devolver su dispositivo usado, utilice el sistema de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para el reciclaje a las instalaciones competentes.